


# FDI Trojnožka

Patentové zařízení, které umožňuje udržet berli ve svislé poloze. Je kompatibilní se všemi druhy berlí FDI.

Návod.

Z berle FDI točivým pohybem ( vlevo či vpravo) stáhneme původní násadec.  
Uchopte FDI Trojnožku za násadec ( gumový) a tlakem nastrčte na berli. Berle je v pozici svislé držena trojnožkou.

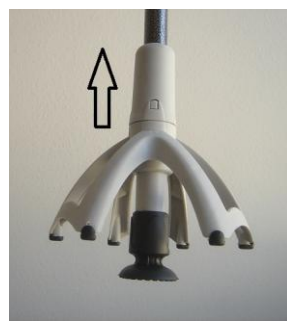

Tahem směrem k rukojeti, dojde k zacvaknutí a uvedení trojnožky do pozice „chůze“.  
Do pozice „stojící“ se berle uvede pootočením trojnožky **vlevo**.

Parametry:

Hmotnost .....110g.  
Průměr trojnožky.....155mm

## Výhradní dovozce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1.Máje 3236/103, Ostrava – Vítkovice, 70300  
Tel./fax: 596 630 615. WWW: [www.ortgroup.cz](http://www.ortgroup.cz)

Výrobce:




FDI FRANCE MEDICAL,F-38490 FITILIEU

# FDI Trojnožka

Patentové zařízení, které umožňuje udržet berli ve svislé poloze. Je kompatibilní se všemi druhy berlí FDI.

Návod.

Z berle FDI točivým pohybem ( vlevo či vpravo) stáhneme původní násadec.  
Uchopte FDI Trojnožku za násadec ( gumový) a tlakem nastrčte na berli. Berle je v pozici svislé držena trojnožkou.

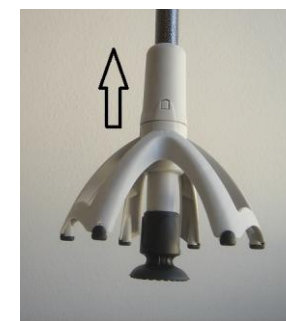

Tahem směrem k rukojeti, dojde k zacvaknutí a uvedení trojnožky do pozice „chůze“.  
Do pozice „stojící“ se berle uvede pootočením trojnožky **vlevo**.

Parametry:

Hmotnost .....110g.  
Průměr trojnožky.....155mm

## Výhradní dovozce:

Ortgroup Medical s.r.o., 1.Máje 3236/103, Ostrava – Vítkovice, 70300  
Tel./fax: 596 630 615. WWW: [www.ortgroup.cz](http://www.ortgroup.cz)

Výrobce:



FDI FRANCE MEDICAL,F-38490 FITILIEU